

デモ実施中

シンプルさと 高浸透を追及した エレクトロポレーション

医院様、患者様双方からご好評です！

医院様のメリット

軽量・コンパクトで
置き場所を選ばない

簡単操作で
スタッフでも施術できる

初期費用が抑えられる
(リース可能)

患者様のメリット

クレンジング機能で
浸透率 UP

バイブレーション機能
による心地よい施術

全身・全顔を隈なく
ケアできる

NEW

スペシャルプローブ
(オプション)

エレクトロポレーション美容機器
オスモポア

ウォーターピーリング
で浸透力UP!

標準
プローブ

導入用プローブ


エレクトロポレーションの原理

痛み・ダウン
タイムゼロ

高分子の美容
成分も導入可

イオン導入の
20倍の浸透力

特殊な電気バースで一時的に皮膚のバリア機能に微細な穴を開け、美容成分を浸透させる技術です。本来、表皮からは浸透しない、コラーゲンやヒアルロン酸、プロテオグリカンなどの高分子の美容成分を真皮まで浸透させます。

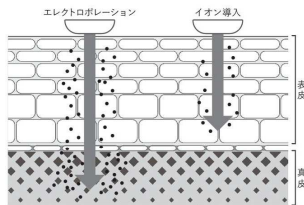

使いやすさと心地よさが両立したプローブ



クレンジング
(C)プローブ

角質除去



スモール
(S)プローブ

全顔用



ラージ
(L)プローブ

全身・首・
デコルテ用



ポイント
(P)プローブ

目の周り・鼻・
唇用

バイブレーション ON/OFF 設定可能

エレクトロポレーションと同時にバイブレーションをかけることで、血行促進やリフトアップ効果が期待されます。



電流の強さを調整可能

プローブ手元にある調節ボタンで簡単に出力レベルの強弱を調整でき、施術を効率よく行うことが可能です。




30分タイマー付きで 施術時間の目安に



本体サイズ・重量：W310×D235×H98 (mm)・約4.0kg
電源電圧・消費電力：AC100V・240V(50/60Hz)・12W

口角のたるみ

1回の施術後

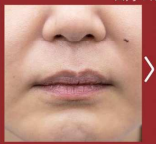

小じわ・目のたるみ・目の下のクマ

1回の施術後



NEW! スペシャルプローブ

リフトアップEプローブ (S) (オプション)

肌に触れる面積が大きいため効率よく薬剤を導入。金メッキ製なので金属が苦手な方にも。さらにリフトアップ効果も期待できます。

リフトアップ

1回の施術後



目的に合わせた導入用美容液 取り揃え多数!

美白

保湿

ニキビ
肌荒れ

アンチ
エイジング

肝斑

ドクターズコスメに精通した
スタッフが施術プランを
ご提案いたします。



導入剤
詳細情報



導入後も安心な充実サポート



スタッフへの技術サポート

丁寧な納品説明に合わせて、技術的な疑問や問い合わせにも対応いたします。



迅速なトラブル対応

故障などのトラブルに、代替品発送・修理など迅速に対応いたします。※購入後1年間の修理保証



講習会の開催

導入美容液の組み合わせ等をレクチャーする講習会を随時開催しています。