


デジタル導入なら コアフロントにおまかせください。

デジタルデンティストリーに精通したスタッフが導入から運用までをトータルサポート

1. 歯科技工士による技術サポート

専用サポートセンターを設置し、導入後も万全の体制でサポートします。コアフロントでは、デジタル歯科に精通した歯科技工士が在籍。PC画面を共有しながらその場で疑問を解消し、必要に応じて遠隔操作によるサポートも行います。機械操作だけでなく、現場で役立つ運用ノウハウまで共有し、導入後も安心してお使いいただけるよう全面的にバックアップします。

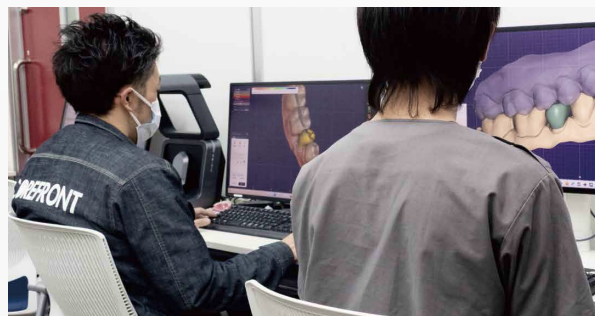

2. 保守 / メンテナンス




保守メンテナンスプランをご用意しております。

3. 不具合対応



不具合時は、現地でトレーニングを受けたスタッフが国内でスピーディーに修理対応いたします。

4. ポータルサイト

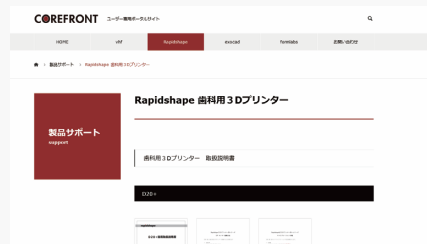

ユーザー様専用のポータルサイトをご用意。マニュアルやトラブルシューティングに関する情報をいつでもご覧いただけます。

製品に関するご質問・資料請求・ご相談など
お気軽にお問い合わせください。

WEB
お問合せ



03-5579-8710
[受付] 平日 9:30~18:00

【医療機器情報】 G-oral スキャン2 (デジタル印象採得装置) 管理医療機器 承認番号: 30400BZ100006A01 / 製造販売元: 株式会社ジオメディ
Aoral スキャン Elite (デジタル印象採得装置) 管理医療機器 承認番号: 30700BZ100017000 / 製造販売元: 株式会社ジオメディ
MetiSmile (頭部顔面規格写真撮影装置) 一般医療機器 届出番号: 13B1X10100000116 / 製造販売元: コアフロント株式会社

お問い合わせ:

COREFRONT コアフロント株式会社 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11 外濠スカイビル 4F
TEL. 03-5579-8710 FAX. 03-5579-8711 www.corefront.com


2026年4月版

製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。記載内容は2026年4月現在のものです。

SHINING 3D
DENTAL



FACE SCANNER

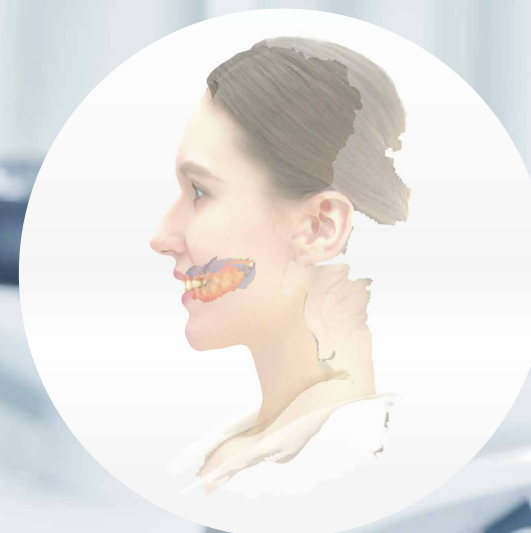

COREFRONT
www.corefront.com

口腔内スキャナー

- 01
- 臨床ワークフローや用途に最適な構成をお選びいただける**充実のラインナップ**
- 02
- 各プロセスにおいて**高度なソフトウェアインテリジェンス**を体感
- 03
- クラウド接続により、クリニックと技工所間での**シームレスなデータ共有を実現**

Aoralscan 3 シリーズ



- 速い・簡単・失敗しにくい
初めてでもスムーズに高品質データを取得
- 余計な部分は自動で除去
AIが不要データをカットし、きれいなスキャンに
- デジタル活用の第一歩に最適
3Dプリンターや矯正シミュレーションにも対応

Aoralscan Elite シリーズ






- インプラントまで1台で対応
スキャン＋位置計測を同時に行えるオールインワン
- 複雑な症例でも、ズレにくい
All-on-Xなど高精度が求められる症例をサポート
- 軽くて疲れにくい
長時間でも手首に負担をかけにくい設計

機種名	Aoralscan 3	Aoralscan 3 Wireless	Aoralscan Elite	Aoralscan Elite Wireless
接続方式	有線 (USB 3.0)	ワイヤレス (Wi-Fi 6)	有線 (Type-C)	ワイヤレス (Wi-Fi 6)
スキャン原理	構造化光	構造化光	構造化光＋フォトグラメトリー (IPG)	構造化光＋フォトグラメトリー (IPG)
重量 (チップ含む)	約 240g	約 330g (バッテリー込)	約 124g	約 194g (バッテリー込)
本体寸法 (mm)	281 × 33 × 46	270 × 50 × 40	245 × 30 × 26	247 × 38 × 37
スキャナーチップ	2種類 (Standard / Mini)	2種類 (Standard / Mini)	3種類 (Big / Standard / Mini)	3種類 (Big / Standard / Mini)
スキャン精度	-	-	5μm (超高精細)	5μm (超高精細)
スキャン深度	22mm	22mm	22mm	22mm
バッテリー性能	-	連続スキャン約2時間		連続スキャン約2時間 (予備込2本付属)

フェイススキャナー

- 01
- DICOMデータの**直接セグメンテーション**および**自動アライメント**に対応
- 02
- 複数形式のデータを共通の座標空間に統合し、**整合・解析が可能**
- 03
- exocadソフトウェアとの高い互換性

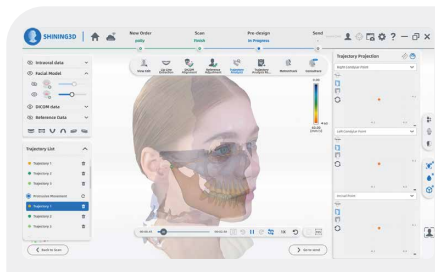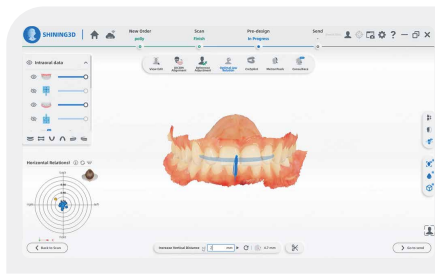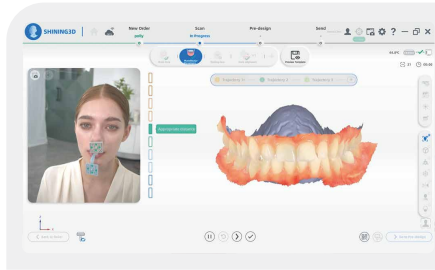

フェイススキャナー仕様一覧

機種名	MetiSmile / MetiSmile-MR
カメラ解像度	データ収集カメラ:130万画素 / HDテクスチャーカメラ:500万画素
精度	50 μm
視野	動作距離：500mm / FOV：210×270mm
出力形式	STL, PLY, OBJ
白LEDの色温度	5,500 K
本体サイズ、本体重量	215×50×75mm、800 g
電源	入力：AC100-220V、50/60 HZ 1.5A / 出力：DC12V、7.0V


推奨PCスペック

CPU	Intel L Core i7-8700及以上
メモリ	16 GB以上、32 GB推奨
HDD	256 GB SSD及以上
画面解像度	1920×1080、60 Hz及以上
接続	USB 3.0
グラフィックカード (GPU)	NVIDIA RTX 2060 6GB及以上
OS	Microsoft Windows 10(64-bit) またはそれ以降のバージョンのWindowsオペレーティングシステム

SHINING 3D
DENTAL



FACE SCANNERS

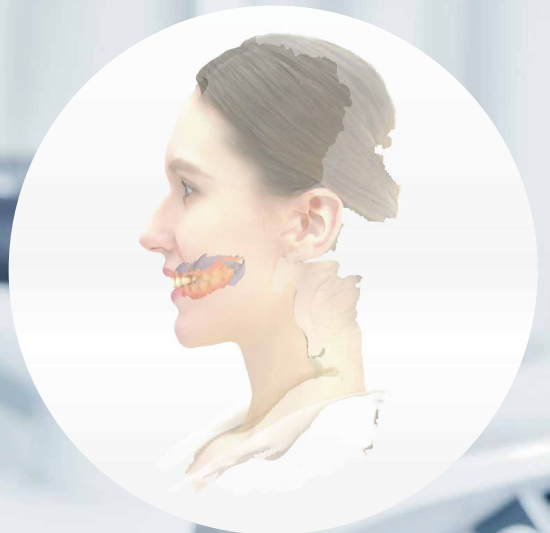

口腔内スキャナー

- 01 臨床ワークフローや用途に最適な構成をお選びいただける**充実のラインナップ**
- 02 各プロセスにおいて**高度なソフトウェアインテリジェンス**を体感
- 03 クラウド接続により、クリニックと技工所間での**シームレスなデータ共有を実現**

Aoralscan 3 シリーズ

Aoralscan 3

コストパフォーマンスに優れた標準機



Aoralscan 3 Wireless

自由度の高いワイヤレスモデル



速い・簡単・失敗しにくい

初めてでもスムーズに高品質データを取得



余計な部分は自動で除去

AIが不要データをカットし、きれいなスキャンに



デジタル活用の第一歩に最適

3Dプリンターや矯正シミュレーションにも対応

Aoralscan Elite シリーズ



Aoralscan Elite

インプラント・フルアーチ対応の次世代機



Aoralscan Elite Wireless

エリート性能のワイヤレス完全版



インプラントまで1台で対応

スキャン+位置計測を同時に行えるオールインワン



複雑な症例でも、ズレにくい

All-on-Xなど高精度が求められる症例をサポート



軽くて疲れにくい

長時間でも手首に負担をかけにくい設計

機種名	Aoralscan 3	Aoralscan 3 Wireless	Aoralscan Elite	Aoralscan Elite Wireless
接続方式	有線 (USB 3.0)	ワイヤレス (Wi-Fi 6)	有線 (Type-C)	ワイヤレス (Wi-Fi 6)
スキャン原理	構造化光	構造化光	構造化光 + フォトグラメトリー (IPG)	構造化光 + フォトグラメトリー (IPG)
重量 (チップ含む)	約 240g	約 330g (バッテリー込)	約 124g	約 194g (バッテリー込)
本体寸法 (mm)	281 × 33 × 46	270 × 50 × 40	245 × 30 × 26	247 × 38 × 37
スキャナーチップ	2種類 (Standard / Mini)	2種類 (Standard / Mini)	3種類 (Big / Standard / Mini)	3種類 (Big / Standard / Mini)
スキャン精度	-	-	5μm (超高精細)	5μm (超高精細)
スキャン深度	22mm	22mm	22mm	22mm
バッテリー性能	-	連続スキャン約2時間		連続スキャン約2時間 (予備込2本付属)

フェイススキャナー

FACE SCANNER

- 01 DICOMデータの直接セグメンテーションおよび自動アライメントに対応
- 02 複数形式のデータを共通の座標空間に統合し、整合・解析が可能
- 03 exocadソフトウェアとの高い互換性



MetiSmile

- 口腔内データと顔貌データの自動アライメント
- 矯正顔貌シミュレーション
- 顔立ち測定・比較


オプション 下顎運動軌跡分析機能モジュール

MetiSmile-MR

- MetiSmileの各標準機能
- 下顎運動軌跡記録機能モジュール搭載

オプション 最適顎間関係確定機能モジュール、下顎運動軌跡分析機能モジュール


※MetiSmileとMetiSmile-MRにおきまして、実機の違いはございません。ソフトウェアの違いとなります。

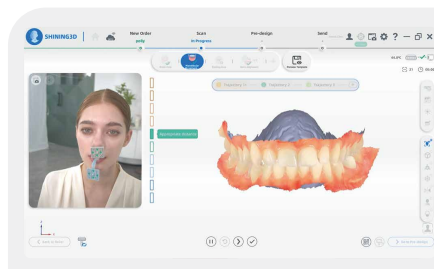

MetiSmile-MR

下顎運動軌跡記録機能モジュール

患者の下顎運動を高精度に記録し、口腔内スキャンデータと統合することで、デジタル上での動的咬合接触の可視化が可能になります。これにより、早期接触の特定および除去が可能となり、長期的に安定した補綴治療の実現に貢献します。

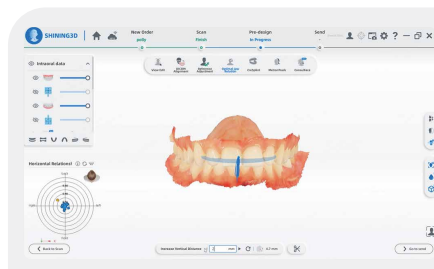


MetiSmile-MR オプション

最適顎間関係確定機能モジュール

最適な顎間関係をスピーディーに特定することが可能です。有歯顎患者においては、咬合リハビリテーションを目的としたスプリントの作製を支援します。無歯顎症例では、確立された最適咬合位に基づき義歯製作をサポートし、治療ワークフロー全体の効率化に寄与します。

注意：本モジュールは、顎関節症(TMD)を有しない患者に適用されます。

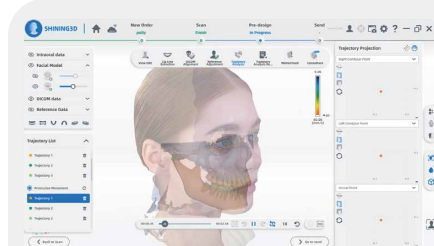

MetiSmile/MetiSmile-MR オプション

下顎運動軌跡分析機能モジュール

顎頭および切歯点の各方向への運動を包括的に把握することが可能です。統合されたCBCTデータと連動することで、3D可視化を実現します。さらに、これらの運動を2次元平面へ投影することで、運動の協調性、咬合の対称性および安定性を高精度に評価できます。

フェイススキャナー仕様一覧

機種名	MetiSmile/MetiSmile-MR
カメラ解像度	データ収集カメラ:130万画素 / HDテクスチャカメラ:500万画素
精度	50 μ m
視野	動作距離: 500mm / FOV: 210×270mm
出力形式	STL, PLY, OBJ
白LEDの色温度	5,500 K
本体サイズ、本体重量	215×50×75mm、800 g
電源	入力: AC100-220V、50/60 HZ 1.5A / 出力: DC12V、7.0V

推奨PCスペック


CPU	Intel Core i7-8700及以上
メモリ	16 GB以上、32 GB推奨
HDD	256 GB SSD及以上
画面解像度	1920×1080、60 Hz及以上
接続	USB 3.0
グラフィックカード (GPU)	NVIDIA RTX 2060 6GB及以上
OS	Microsoft Windows 10(64-bit) またはそれ以降のバージョンのWindowsオペレーティングシステム

デジタル導入なら コアフロントにおまかせください。

デジタルデンティストリーに精通したスタッフが導入から運用までをトータルサポート

1. 歯科技工士による技術サポート

専用サポートセンターを設置し、導入後も万全の体制でサポートします。コアフロントでは、デジタル歯科に精通した歯科技工士が在籍。PC画面を共有しながらその場で疑問を解消し、必要に応じて遠隔操作によるサポートも行います。機械操作だけでなく、現場で役立つ運用ノウハウまで共有し、導入後も安心してお使いいただけるよう全面的にバックアップします。

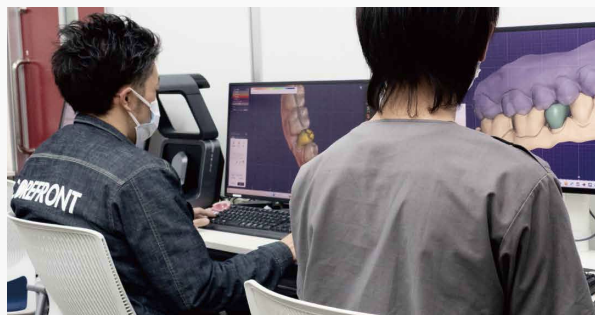

2. 保守 / メンテナンス




保守メンテナンスプランをご用意しております。

3. 不具合対応



不具合時は、現地でトレーニングを受けたスタッフが国内でスピーディーに修理対応いたします。

4. ポータルサイト

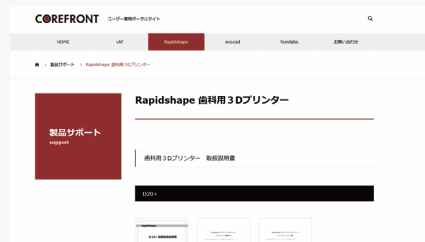

ユーザー様専用のポータルサイトをご用意。マニュアルやトラブルシューティングに関する情報をいつでもご覧いただけます。

製品に関するご質問・資料請求・ご相談など
お気軽にお問い合わせください。

WEB
お問合せ



03-5579-8710
[受付] 平日 9:30~18:00

【医療機器情報】 G-oral スキャン2 (デジタル印象採得装置) 管理医療機器 承認番号: 30400BZ100006A01 / 製造販売元: 株式会社ジオメディ
Aoral スキャン Elite (デジタル印象採得装置) 管理医療機器 承認番号: 30700BZ100017000 / 製造販売元: 株式会社ジオメディ
MetiSmile (頭部顔面規格写真撮影装置) 一般医療機器 届出番号: 13B1X10100000116 / 製造販売元: コアフロント株式会社

お問い合わせ:

COREFRONT

コアフロント株式会社 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11 外濠スカイビル 4F
TEL. 03-5579-8710 FAX. 03-5579-8711 www.corefront.com

2026年4月版

製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。記載内容は2026年4月現在のものです。